

159 Euro
TVA inclus

FOTOLIU & SALTEA PENTRU MASAJ

MODEL RT – D012



INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Vă mulțumim pentru alegerea făcută!

Înainte de utilizare vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile din manualul de utilizare și acordați o atenție deosebită măsurilor de protecție, pentru a asigura o funcționare și utilizare adecvată.

Păstrați acest manual la îndemână pentru consultare ulterioară.

Cuprins

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

Recomandări generale	3
Precauții la utilizare	3
Instrucțiuni privind utilizarea dispozitivului de comandă	3
Condiții de utilizare	3
Condiții necorespunzătoare de utilizare	4
Asamblare și întreținere	4
Instrucțiuni privind cablul de alimentare	4

DENUMIREA ȘI FUNCȚIUNEA COMPONENTELOR

Structura exterioară	5
Spatele saltelei de masaj	5
Dispozitivul de comandă	6
Descrierea funcțiilor dispozitivului de comandă	7

FUNCȚII ȘI CARACTERISTICI

Funcții și caracteristici	8
---------------------------	---

UTILIZARE

Pregătirea înainte de utilizare	9
Mod de utilizare	9

DEPOZITAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

Întreținerea saltelei	10
De reținut	10

DISFUNCȚIONALITĂȚI POSIBILE

11

SPECIFICAȚII TEHNICE

11

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

Recomandări generale

- Nu folosiți salteaua de masaj în medii umede sau cu praf, pentru a evita electrocutarea sau distrugerea saltelei.
- Nu folosiți salteaua în încăperi cu temperatura peste 40° C
- Nu depozitați salteaua în mediul exterior.

Atenție!

Dacă salteaua este mutată dintr-un loc răcăros într-unul mai cald este recomandată utilizarea după o oră, pentru a elimina posibilitatea de apariție a condensului care ar putea determina deteriorarea echipamentului.

Precauții la utilizare

Pentru persoanele care suferă de afecțiunile enumerate mai jos, recomandăm consultarea medicului înainte de utilizarea saltelei:

- Persoane aflate sub tratament sau cu o stare generală de sănătate necorespunzătoare;
- Pacienți cu tumori maligne
- Femei gravide sau aflate în perioada de ciclu
- Pacienți cu boli acute
- Pacienți cu probleme cardiace
- Pacienți cu osteoporoză
- Pacienți care folosesc dispozitive medicale electronice implantate în organism, cum ar fi de exemplu stimulatoare cardiace, etc.

Instrucțiuni privind utilizarea dispozitivului de comandă

- Nu acționați dispozitivul de comandă cu mâinile umede
- Nu trântiți dispozitivul de comandă de podea sau în apă.
- Nu așezați obiecte grele pe dispozitivul de comandă

Condiții de utilizare

- Nu folosiți aparatul de masaj împreună cu alte aparate medicale sau pături electrice.
- Nu folosiți aparatul de masaj pentru tratament medical
- Folosiți aparatul de masaj după minim 30 minute după servirea mesei
- Nu așezați obiecte grele pe nici una din părțile saltelei pentru a evita posibile deteriorări ale mecanismelor.
- Nu masați continuu o anumită parte a corpului mai mult de 5 minute.
- Salteaua va fi folosită concomitent de o singură persoană.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

Atenție!

Nu adormiți cu salteaua de masaj în funcțiune.

Nu folosiți salteaua când sunteți sub influența alcoolului sau vă simțiți rău.

Nu târați salteaua pe jos și nu o mutați cu cablul conectat la sursa de curent, pentru a evita deteriorarea mecanismului.

Înainte de utilizare, asigurați-vă că ați scos telefonul mobil, cheile, obiecte ascuțite sau alte valori din buzunare.

Condiții necorespunzătoare de utilizare

- Opriți funcționarea, întrerupeți alimentarea cu curent și scoateți din priză salteaua dacă sunteți în una din situațiile enumerate mai jos:
- Salteaua a fost stropită accidental cu apă.
- Unele accesorii s-au deteriorat și unele componente interioare sunt expuse.
- Cordonul de alimentare este deteriorat.
- Dacă simțiți dureri anormale sau severe în timpul masajului.
- Dacă sesizați funcționarea anormală a saltelei
- Salteaua se oprește instantaneu.
- Pe timp de furtună.

Asamblare și întreținere


- Nu desfaceți husa din piele ecologică și nu expuneți componentele interne, pentru a evita pericolul de electrocutare sau deteriorarea mecanismelor.
- Salteaua va fi reparată doar de personal autorizat; nu dezamblați și nu reparați salteaua singuri.

Instrucțiuni privind cablul de alimentare


- Verificați dacă tensiune de alimentare corespunde celei necesare saltelei.
- Nu manevrați cablul electric cu mâinile ude, pentru a evita pericolul de electrocutare.
- Când scoateți din priză, trageți de ștecher, nu de cablul de alimentare.
- Asigurați-vă că asupra cablului de alimentare nu presează alte produse sau obiecte grele.
- Dacă observați deteriorarea cablului de alimentare, opriți funcționarea saltelei imediat, întrerupeți alimentarea cu curent și doar apoi scoateți ștecherul cablului din priză. Contactați personalul autorizat pentru reparații și întreținere.

DENUMIREA ȘI FUNCȚIUNEA COMPONENTELOR

Structura exterioară

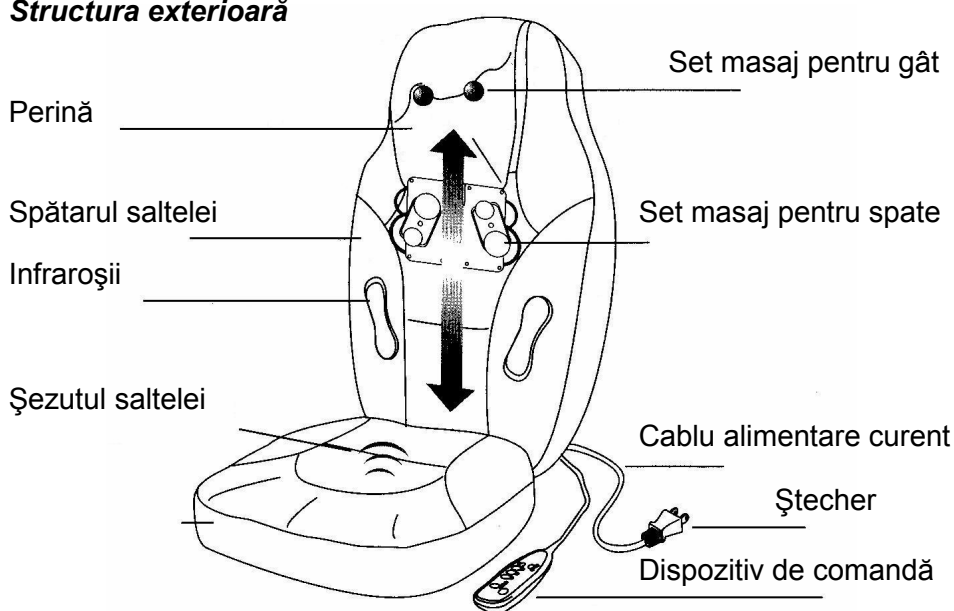


Partea posterioară

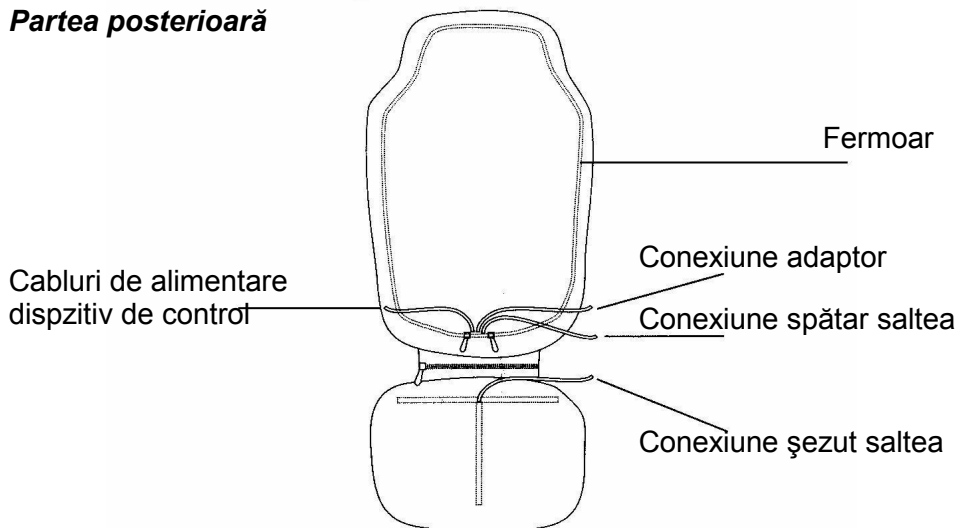


DENUMIREA ȘI FUNCȚIUNEA COMPONENTELOR

Dispozitivul de comandă

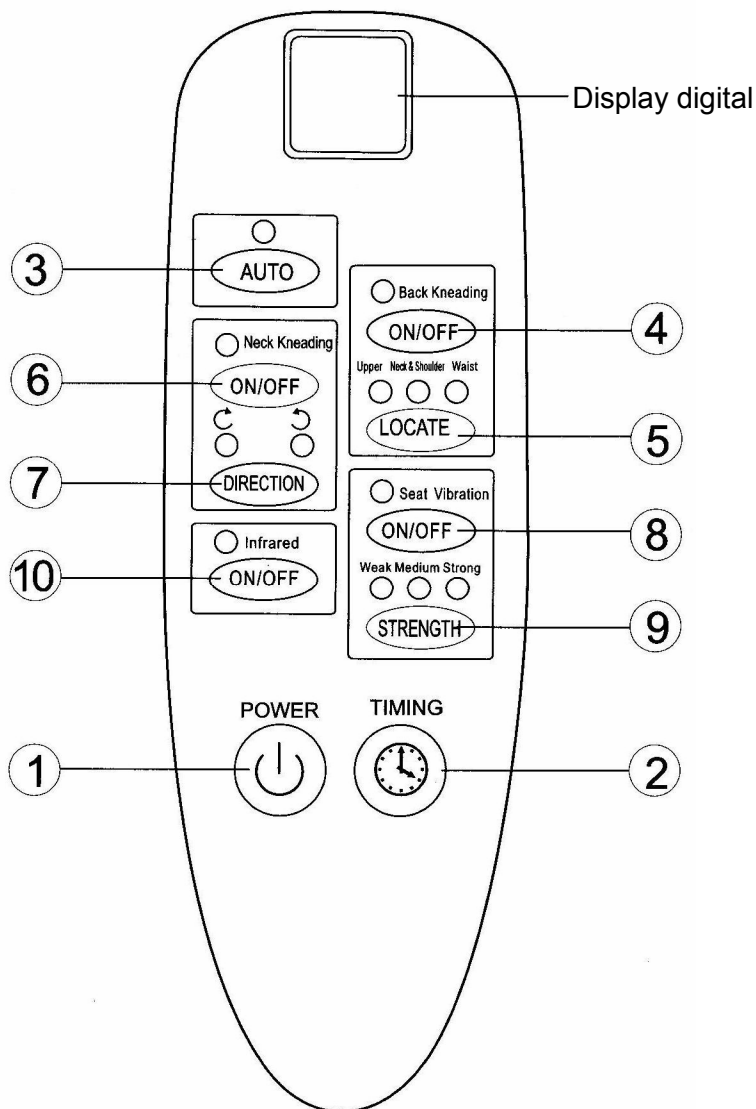

DENUMIREA ȘI FUNCȚIUNEA COMPONENTELOR

Descrierea funcțiilor dispozitivului de comandă

1. POWER: apăsați tasta „” pentru a porni/ opri salteaua de masaj. Când salteaua este pornită, pe display se va afișa timpul implicit (20 minute), masajul funcționează la nivelul superior ”UPPER”, intensitatea vibrațiilor este medie, masajul gâtului funcționează alternativ în sensul acelor de ceasornic și invers, radiațiile infraroșii sunt aprinse, când se oprește alimentarea, pe display se va afișa „OF”, și toate funcțiunile de masaj sunt întrerupte, la fel și radiațiile infraroșii; dispozitivul de masaj montat pe spătar se resetează.

2. TIMING: Când se pornește salteaua de masaj, timpul de masaj poate fi setat la 3 niveluri (10 minute, 20 de minute și 30 de minute). Timpul presetat va fi afișat pe display. După setare, timpul de lucru al saltelei este contorizat, iar pe display apare afișat timpul de masaj rămas.

3. AUTO: când este pornită salteaua de masaj, aceasta funcționează în modul auto.

4. Tasta ON/ OF Back Kneading (masaj spată): Când porniți salteaua de masaj apăsați această tastă dacă doriți oprirea funcției de masaj a spatelui. Când funcția este pornită, salteaua funcționează la nivel superior „UPPER”, când funcția este oprită, dispozitivul de masaj al spatelui se resetează.

5. LOCATE: Când porniți salteaua de masaj, puteți seta 3 zone de masaj: superior, gât și umeri, talie (brâu)

6. Tasta ON/ OF Neck Kneading (masaj gât): Când porniți salteaua de masaj apăsați această tastă dacă doriți oprirea funcției de masaj a gâtului. Când funcția este activă, salteaua de masaj funcționează în sensul acelor de ceasornic.

7. DIRECTION: când este activă funcția de masaj a gâtului, acționați această tastă pentru a selecta alternativ funcția de masaj în sensul acelor de ceasornic și invers.

8. Tasta ON/ OF Seat Vibration (vibrație șezut): Când porniți salteaua de masaj apăsați această tastă pentru a opri funcția de masaj pentru șezut. Când funcția este pornită, funcționează la nivel mediu de intensitate.

9. STRENGTH (intensitate): când este pornită funcția de vibrație, apăsați această tastă pentru a selecta una din cele trei intensități de vibrație: slabă, medie sau puternică.

10. Tasta ON/ OF Infrared: Când porniți salteaua de masaj apăsați această tastă pentru a opri funcția infraroșu a saltelei.

DENUMIREA ȘI FUNCȚIUNEA COMPONENTELOR

Funcții și caracteristici

- Există două tehnici de masaj tradiționale:

Masajul prin „frământare”:

Salteaua funcționează ca un maseur profesionist, oferind un masaj circular prin de presare/ eliberare și combinații „frământare/ ciupire”.

Masajul prin vibrație:


Salteaua funcționează ca un maseur profesionist, oferind pentru început un masaj ritmic și chiar apăsat, oferind relaxare și delectare.



Masajul gâtului



Masajul spatelui

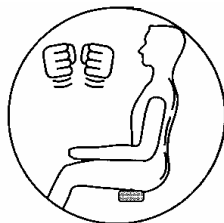

Masajul șezutului prin vibrație

UTILIZARE

Pregătirea înainte de utilizare


Verificați integritatea saltelei de masaj.

Atenție!


Nu târâți salteaua pe jos și nu o mutați cu cablul conectat la sursa de curent, pentru a evita deteriorarea acesteia.

Mod de utilizare

Conectați salteaua la sursa de curent. În momentul conectării, pe display apare afișat „OF”.

Când apăsați tasta „” a dispozitivului de comandă, salteaua începe să funcționeze. Vă rugăm consultați secțiunea ***Descrierea funcțiilor dispozitivului de comandă*** pentru detalii asupra modului de funcționare.

Pentru utilizare, salteaua poate fi amplasată pe pat, canapea, fotoliu sau direct pe pardosea.

Pentru a opri funcționarea saltelei de masaj apăsați din nou tasta „”, după care deconectați de la sursa de curent.

Atenție!

Dacă în timpul funcționării nu vă simțiți confortabil sau sesizați deteriorări ale saltelei, opriți imediat utilizarea acesteia și deconectați de la sursa de curent. Contactați persoana autorizat pentru identificarea și remedierea defecțiunii. Este interzisă dezasamblarea și repararea de către personal neautorizat.

DEPOZITAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

Întreținerea saltelei

1. Curățarea:

Înainte de curățare asigurați-vă că salteaua este deconectată de la sursa de curent.

Folosiți o cârpă moale pentru a curăța husa saltelei și dispozitivul de comandă. Pentru murdărie persistentă folosiți o cârpă umezită sau solvent neutru, după care ștergeți cu o cârpă uscată.

Atenție!

Nu manevrați cablul de alimentare cu mâinile ude.

Salteaua de masaj nu va fi curățată direct cu apă. Asigurați-vă că apa sau alte lichide nu pot intra în interiorul saltelei.

Nu folosiți materiale de curățare abrazive, soluții pe bază de benzen sau diluant pentru curățarea saltelei; în caz contrar, culoarea se poate mătui sau materialul se poate eroda sau crăpa.

Husa nu se calcă.

Dacă husa se udă accidental, nu o îndepărtați de pe saltea. Lăsați-o să se usuce în mod natural.

2. Întreținerea

Asigurați-vă că salteaua este deconectată de la sursa de curent atunci când nu este folosită.

Păstrați husa curată, departe de medii umede, cu temperaturi ridicate sau în medii cu gaze volatile.

Dacă nu folosiți husa o perioadă îndelungată de timp, vă rugăm să o acoperiți cu o husă de protecție împotriva prafului.

Atenție!

Nu depozitați husa expusă razelor solare sau la temperatură ridicată. Aceasta poate deteriora culoarea și textura husei.

De reținut

Pe perioada utilizării, verificați în permanență existența următoarelor simptome:

Miros de ars

La atingerea cablului de alimentare, uneori alimentarea este orpită, alte ori nu.

Cablul de alimentare este fierbinte

Alte simptome atipice.

Atenție!

Pentru evitarea unor posibile accidente, opriți utilizarea saltelei de masaj dacă sesizați apariția simptomelor menționate mai sus.

Opriți salteaua și deconectați de la rețeaua de alimentare cu curent, apoi solicitați intervenția personalului specializat pentru efectuarea reparațiilor.

Nu demontați singuri salteaua pentru reparații.

DISFUNCȚIONALITĂȚI POSIBILE

	Probleme posibile	Cauze posibile	Soluții
1	Salteaua nu funcționează	1.1. Este întreruptă alimentarea cu curent	1.1. Folosiți salteaua când se reia alimentarea cu curent
		1.2. Ștecherul nu este corect conectat la priză.	1.2. Verificați conectarea corectă a ștecherului în priză
2	Salteaua se opriște subit din funcționare	2.1. Este întreruptă alimentarea cu curent	2.1. Folosiți salteaua când se reia alimentarea cu curent
		2.2. Cablul este deconectat de la rețea	2.2. Reconectați salteaua de masaj

SPECIFICAȚII TEHNICE

Denumire produs:	Saltea pentru masaj
Model:	RT – D012
Culoare:	Crem
Tensiunea de alimentare:	220- 240 V~
Frecvența:	50/ 60 Hz
Putere nominală:	65 W